




BIOPTRON® 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

FILTRES

FRANÇAIS (FR)

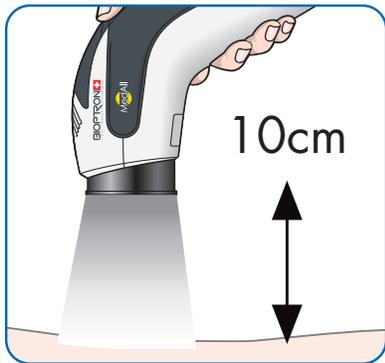

1



2



3



4

COMMENT UTILISER?

A une distance de 10 cm, positionnez l'appareil BIOPTRON avec le filtre souhaité pour couvrir la zone que vous souhaitez traiter (Image 1) à traiter. Lorsque vous traitez des zones plus grandes que le diamètre du filtre, traitez-les une par une en respectant le temps recommandé.

COMMENT CHANGER LE FILTRE?

Retirez avec précaution et sans forcer la bague du filtre (Image 2) à remplacer et insérez le filtre de la couleur souhaitée comme indiqué dans l'image 3. Tenez l'anneau extérieure du filtre plutôt que le verre.

COMMENT NETTOYER LE FILTRE? (Image 4)

1. Retirez le filtre de l'appareil en tenant l'anneau extérieur du filtre.
2. Utilisez un chiffon doux, humide et non pelucheux pour éviter de rayer la surface en verre.
3. Séchez le filtre avec un autre chiffon non pelucheux.

GARANTIE

- 5 ans si l'appareil est utilisé comme prévu et si les avertissements sont respectés.
- Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication
- Cette garantie ne couvre pas : les changements esthétiques résultant de l'usure ordinaire qui n'affectent pas les performances du produit, ni les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.

AVERTISSEMENTS

1. N'utilisez pas de produits chimiques (par exemple, de l'alcool isopropylique) pour nettoyer la face interne ou externe de la surface du verre et de l'anneau du filtre.
2. Rangez le filtre dans une pochette de protection pour éviter l'accumulation de poussière et la décoloration due à l'exposition au soleil.
3. Le filtre est fait de verre fragile, il doit donc être manipulé avec soin !
4. L'utilisateur n'est pas autorisé à retirer le verre du filtre



PMD-ME145-22-FR
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG
SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

F R A N Ç A I S (F R)